

ハイグレードな仕様と佇まいが
至極の癒し空間を生み出す

詳しくは製品サイトへ



衛生面や使用感が気になるカバーやリモコンは取り替えができるので
メンテも安心、効率よく低ランニングコストで導入できます。

リモコンのメンテも簡単・低コスト
リモコン取り替え可能



※別途追加購入必要

終了時までゆったりできる
自動リクライニング機能



衛生面・メンテも安心
取換えカバー(7部位)※




- ① 枕
- ② 肩カバー
- ③ 背パッド
- ④ 腕カバー
- ⑤ 腰横カバー
- ⑥ ふくらはぎカバー
- ⑦ 足首カバー



多彩なもみ技で多様な疲れやコリをほぐす

部位ごとに多彩なもみ技を搭載した ロングストローク4つ玉メカ

11種類の多彩なもみ技でマッサージを行う4つ玉メカを搭載。さらにロングストロークフレームを採用し、首すじ〜太もも裏まで一気にほぐします。

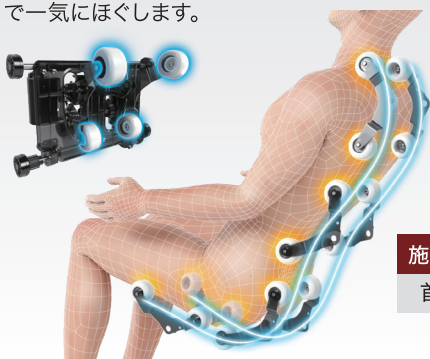

もみ技
11種類

施療範囲 約97cm
首すじ〜太もも裏

※イラストはイメージです。

心地よい快適性と体感をもたらす

体圧分散させ深いマッサージを実現 フロートリクライニング

リクライニング時に背と連動して座面も上昇し、リラックス姿勢でより密着したマッサージを体感できます。また、後方スペースは約20cmあればフルリクライニングができるため、限られたスペースでも設置できます。



マッサージ
体感UP

後方スペース
わずか
約20cm

人それぞれの疲れと体形に対応するメカマッサージ

ロングストローク4つ玉メカ

弾力のある大きな4つのもみ玉が首すじ〜お尻までの広範囲を力強くほぐします。



肩位置自動検出(センシング)

自動的に肩位置を検知し、背・腰部の位置を予測、ひとり一人に適切なポイントでマッサージを行います。

ロングストローク4つ玉メカによる11種類のもみ技

- ①もみ上げ ②もみ下げ ③たたき ④さざなみ ⑤筋筋のぼし ⑥こね上げ ⑦こね下げ
⑧ほぐしもみ上げ ⑨ほぐしもみ下げ ⑩ループもみ上げ ⑪ループもみ下げ

疲れた体を贅沢に 全身エアーマッサージ

エアークッション
24個

強弱調節
3段階

全身エアーマッサージ

24個のエアーバッグと足裏の指圧突起で、全身の疲れをスッキリ解放します。



パルスモード搭載

小刻みなエアーの圧迫・開放を組み合わせた動作で血行促進を図ります。

タッチパネルで直感的な操作が可能

フルカラータッチパネルリモコン

動作中のもみ動作や施療部位、強弱動作やコース時間が一目でわかるフルカラー液晶リモコンを採用しました。

3種類の全身自動コースと 4つの部位集中コースをご用意

コース選択画面

ヒーリング

リフレッシュ

リラックス

部位集中

首肩/背/腰/尻

マニュアル



施療終了
時間表示

自動
リクライニング
ボタン

自動で背もたれが
下がり脚部が上が
ります。終了時は
自動で戻ります。

入/切ボタン

急停止ボタン

リクライニングボタン

もみ玉位置調節ボタン

マッサージチェア MO57 OH-5000

チャイルドロック機能

移動用キャスター付き

メーカー希望小売価格:605,000円(税込)

本体寸法:(通常時)幅約76×奥行約145×高さ約118cm
(リクライニング時)幅約76×奥行約193×高さ約97cm

リクライニング角度:約130度〜約156度

質量:約87kg

電源:AC100V(50/60Hz)

消費電力:120W(待機電力:8W)

定格時間:30分(タイマー約15分)

医療機器認証番号:302AKBZX00091000


(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

JANコード:4951704171045




ブラック(BK)


寸法(cm)

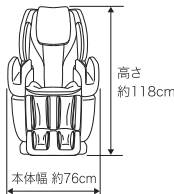

リクライニングしていないとき

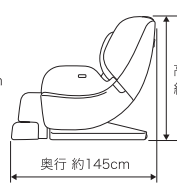

リクライニングして脚部を伸ばしたとき

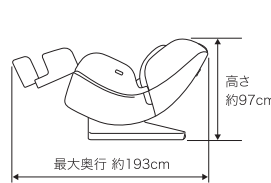

別売品

首肩専用不織布カバー(30枚入り)

寸法:横約40×縦約71cm

材質:不織布

メーカー希望小売価格:3,278円(税込)



最小搬入幅 約74cm

搬入幅:本体幅72cm+2cm
(養生のため)以上必要です。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル

0120-027-612

受付:平日9:00~17:30

(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号

06-4793-0818

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただきます際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

株式会社サンオート

〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目16番2号

TEL: 03-3986-3808

FAX: 03-3986-3976